

CÔNG TY TNHH KI-WORKS (VIỆT NAM)

Số 40 Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam -

TP. Thuận An, T. Bình Dương, Việt Nam

Singapore,

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TCCS 02:2020/CTY-KW

DỤNG CỤ CẠO LỪỚI

Ban hành: lần 1

Soát xét:

Ký hiệu tiêu chuẩn thay thế:

Bình Dương, ngày 28 tháng 08 năm 2020

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP



Gosuke Ko

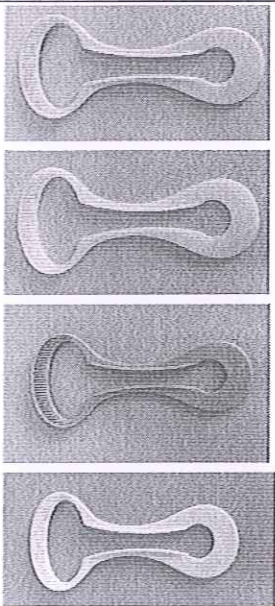
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 02:2020/CTY-KW

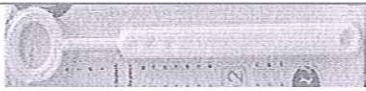
DỤNG CỤ CẠO LƯỠI

1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm: Dụng cụ cạo lưỡi Okamura, Dụng cụ cạo lưỡi Asahi sử dụng để loại trừ mảng bám và vi khuẩn bám trên bề mặt của lưỡi lưỡi, từ đó hạn chế triệu chứng hôi miệng do vi khuẩn gây ra, do Công ty THHH Ki-Works Việt Nam, địa chỉ: Số 40 Đại lộ Độc lập, KCN Việt Nam-Singapore, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương sản xuất, và do Công ty TNHH SX và TM T&H Việt Nam phân phối.

2. Quy cách sản phẩm:

Tên sản phẩm	Mô tả	Quy cách
Model số: 1. DP-TC5PN 2. AS-TC2P		
		1. <u>Tay cầm:</u> - <u>Màu sắc:</u> trắng, xanh, hồng, vàng... - <u>Kích thước:</u> + Dụng cụ cạo lưỡi Okamura: Chiều dài: 82 mm $\pm$ 2 mm Chiều rộng đầu lớn: 35 mm $\pm$ 2 mm Chiều rộng đầu nhỏ: 25 mm $\pm$ 2 mm Chiều rộng thân: 11 mm $\pm$ 2 mm + Dụng cụ cạo lưỡi Asahi: Chiều dài: 150 mm $\pm$ 5 mm Chiều rộng đầu lớn: 25 mm $\pm$ 2 mm Chiều rộng đầu nhỏ: 10 mm $\pm$ 2 mm Chiều rộng thân: 10 mm $\pm$ 2 mm

		<i>Ghi chú: Các kích thước này có thể thay đổi tùy thuộc vào công năng sử dụng của sản phẩm và theo yêu cầu của thị trường.</i> <i>Kiểm tra kích thước bằng các dụng cụ đo chuyên dụng có cấp chính xác phù hợp.</i> - <u>Chất liệu</u>: PE - <u>Xuất xứ</u>: Đài Loan => Công dụng: Dụng cụ cạo lưỡi dùng để loại trừ mảng bám và vi khuẩn tích tụ trên bề mặt của lưỡi lưỡi, hạn chế triệu chứng hôi miệng do vi khuẩn gây ra, giúp giữ vệ sinh hốc miệng, hạn chế bệnh viêm nướu và nha chu, sâu răng.
	2. <u>Giấy bao bì</u>:	- <u>Chất liệu</u>: được làm bởi gỗ chất lượng cao, có tính chất sợi gỗ cứng cho giấy phẳng, lán. - <u>Công dụng</u>: Nhằm đóng gói sản phẩm sạch, đẹp, để sản phẩm không bị bám bẩn từ bên ngoài. - <u>Xuất xứ</u>: Việt Nam
	3. <u>Nhựa bao bì PET</u>:	- <u>Chất liệu</u>: Được làm từ nhựa PET chính phẩm - <u>Công dụng</u>: Nhằm đóng gói sản phẩm sạch, đẹp, để sản phẩm không bị bám bẩn từ bên ngoài. - <u>Xuất xứ</u>: Việt Nam

- Sản phẩm có nhiều màu sắc, nguyên liệu khác nhau tùy theo nhu cầu của thị trường và yêu cầu của khách hàng.

3. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử:

3.1 Yêu cầu về ngoại quan:

Sản phẩm trước khi được đem ra ngoài thị trường, phải được kiểm tra bằng mắt thường về độ đồng nhất của sản phẩm, sản phẩm có hình dạng cân đối, hài hòa, thẩm mỹ không được có chỗ dày mỏng bất thường nhìn thấy được.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét bên trong lẫn bên ngoài.

3.2 Yêu cầu về rơi tự do:

Sau khi thử nghiệm, sản phẩm không được hư hỏng, biến dạng.

Tiến hành thử nghiệm: Sản phẩm được đặt ở vị trí nằm ngang, như trong sử dụng bình thường. Thả rơi tự do 3 lần từ độ cao 1m xuống nền xi măng. Sau khi thử nghiệm, sản phẩm không được hư hỏng, biến dạng.

3.3 Khả năng chịu nhiệt của sản phẩm:

Sản phẩm không được biến dạng, không được chảy, nhão.

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm: Đặt sản phẩm vào tủ nhiệt đã cài đặt sẵn nhiệt độ 100°C trong 24h liên tục. Sau đó, mẫu được lấy ra ngoài. Sau thử nghiệm này, sản phẩm không được biến dạng, không được chảy, nhão.

3.4 Khả năng chịu tải tĩnh của sản phẩm:

Sản phẩm phải chịu được tải và không được hư hỏng biến dạng.

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm: Đặt lên kệ một khối lượng là 10 kg lên phần đầu cào lưỡi trong 5h. Sau thử nghiệm này, sản phẩm không được biến dạng, hư hỏng.

3.5 Số lần bẻ cong không gãy:

Sau thử nghiệm sản phẩm không được gãy tay hay biến dạng.

Tiến hành thử nghiệm: Dùng tay bẻ sản phẩm qua lại 5 lần trong 15 phút. Sau thử nghiệm sản phẩm không được gãy hay biến dạng.

4. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản:

4.1 Bao gói:

Sản phẩm được đóng thành:

- Dụng cụ cào lưỡi Asahi: 2 cây/vĩ giấy
- Dụng cụ cào lưỡi Okamura: 5 cây/hộp nhựa/vĩ giấy

Số lượng dụng cụ cào lưỡi có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

4.2. Ghi nhãn sản phẩm:

Trên mỗi đơn vị bao gói có dán nhãn phù hợp Nghị 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 và các văn bản hiện hành khác, nội dung bao gồm:

DỤNG CỤ CÀO LƯỠI OKAMURA Công dụng: làm sạch các mảng bám ở lưỡi, phòng bệnh nha chu, hôi miệng. Thành phần: Nhựa PE. Hướng dẫn sử dụng: Đưa lưỡi ra trước, đưa vòng lớn hơn của cây đến 1/3 sau của lưỡi cào ra trước vài lần. Không dùng cho người bị loét lưỡi, nhiễm nấm ở lưỡi, viêm lưỡi. Bảo quản: Trong điều kiện bình thường, tránh để gần hóa chất, tránh xa tầm tay trẻ em. Thông số kỹ thuật: chiều dài: 8,2 cm ($\pm 0,2$ cm); Chiều rộng đầu lớn: 3,5 cm ($\pm 0,2$ cm); Chiều rộng đầu nhỏ: 2,5 cm ($\pm 0,2$ cm); Chiều rộng thân: 1,1 cm ($\pm 0,2$ cm). Số lượng: 5 cây/vĩ Khối lượng tịnh: 25 gam ± 5 gam Nhà sản xuất: Công ty TNHH Ki-Works Việt Nam - Số 40 Đại Lộ Bình Dương, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam. Nhà phân phối: Công ty TNHH SX và TM T&H Việt Nam - Số 12 ngõ 370, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội - ĐT: (024) 3759 0382 Fax: (024) 3759 0383 Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh - 745/131 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (028) 6289 2025 Fax: (028) 6289 2023 Hạn sử dụng: 10 năm kể từ ngày sản xuất (NSX in trên bao bì ngày/tháng/năm) HOTLINE: 0912770046
--

DỤNG CỤ CÀO LƯỠI ASAHI Công dụng: làm sạch các mảng bám ở lưỡi, phòng bệnh nha chu, hôi miệng. Thành phần: Nhựa PE. Hướng dẫn sử dụng: Đưa lưỡi ra trước, đưa vòng lớn hơn của cây đến 1/3 sau của lưỡi cào ra trước vài lần. Chống chỉ định: Không dùng cho người bị loét lưỡi, nhiễm nấm ở lưỡi, viêm lưỡi Bảo quản: Trong điều kiện bình thường, tránh tiếp xúc trực tiếp hóa chất.

Thông tin cảnh báo: Tránh xa tầm tay trẻ em.

Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 15 cm $\pm$ 0,5 cm; Chiều rộng đầu lớn: 2,5 cm $\pm$ 0,2 cm; Chiều rộng đầu nhỏ: 1 cm $\pm$ 0,2 cm; Chiều rộng thân: 1 cm $\pm$ 0,2 cm.

Số lượng: 2 cây/vĩ, Khối lượng tịnh: 10 gam ($\pm$ 0,5 gam)

Nhà sản xuất: Cty TNHH Ki-Works Việt Nam - Số 40 Đại Lộ Bình Dương, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, TP. Bình Dương, Việt Nam.

Nhà phân phối: Công ty TNHH SX và TM T&H Việt Nam - Số 12 ngõ 370 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. ĐT: (024) 3759 0382 Fax: (024) 3759 0383

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - 745/131 Quang Trung, P.12, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (028) 6289 2025 Fax: (028) 6289 2023

HSD: 10 năm kể từ ngày sản xuất (NSX in trên bao bì ngày/tháng/năm).

HOTLINE: 0912770046

5. Phương pháp sử dụng:

Cạo lưỡi là công việc đơn giản nhưng có thể loại bỏ được rất nhiều vi khuẩn trú ngụ trong khoang miệng. Chính vì vậy mà bạn nên vệ sinh lưỡi thường xuyên để hạn chế hôi miệng và các bệnh về răng miệng.

Cây cạo lưỡi là 1 dụng cụ được thiết kế bởi một số nha sĩ, có tác dụng vệ sinh lưỡi một cách hiệu quả và an toàn. Cây cạo lưỡi làm giảm hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi (Volatile Sulfur Compounds) gây ra bởi vi khuẩn trong miệng. Hiệp hội nha khoa Hoa Kỳ đã công nhận VSCs là nguyên nhân chính gây ra hôi miệng và góp phần vào bệnh nha chu.

+ Mục đích:

Mục đích chính của sử dụng cây cạo lưỡi là loại trừ mảng bám và vi khuẩn tích tụ trên bề mặt của lưng lưỡi, từ đó hạn chế triệu chứng hôi miệng do vi khuẩn gây ra.

Việc loại trừ mảng bám và vi khuẩn cũng giúp giữ vệ sinh hốc miệng, hạn chế bệnh viêm nướu và nha chu cũng như sâu răng.

+ Chỉ định:

Người lớn và trẻ em đều nên sử dụng cây cạo lưỡi vào mỗi ngày, ít nhất 2 lần buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ, hoặc sau mỗi bữa ăn kèm với chải răng.

+ Chống chỉ định:

Những người có bệnh ở lưỡi mà việc sử dụng cây cạo lưỡi có thể làm bệnh nặng thêm hoặc tạo điều kiện dễ bội nhiễm. Ví dụ: loét lưỡi, nhiễm nấm ở lưỡi, viêm lưỡi.

+ Cách thực hiện:

Đưa lưỡi ra trước, giữ đầu tận cùng của cây cạo lưỡi trong tay, đưa vòng lớn hơn của cây đến phần sau của lưỡi (1/3 sau của lưỡi). Cạo ra trước vài lần, súc miệng để loại bỏ những mảng bám và tiếp tục. Súc miệng sạch sau khi đã cạo xong.

+ Thuận lợi:

Để sử dụng. Triệt để loại trừ mảng bám ở bề mặt của lưng lưỡi (là nơi mà bàn chải đánh răng và nước súc miệng ít khi làm sạch) và giảm hôi miệng. Tăng thêm vị giác cho lưỡi. Giảm vi khuẩn gây viêm họng.

6. Vận chuyển: Vận chuyển trong điều kiện bình thường, tránh va đập mạnh.

7. Bảo quản: Bảo quản trong điều kiện bình thường, tránh để gần hóa chất.

**CÔNG TY TNHH KI-WORKS
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02:2020/QĐ-KW

Bình Dương, ngày 28 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng:

CÔNG TY TNHH KI-WORKS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 07 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật;
- Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này:

Tiêu chuẩn..... **TCCS 02:2020/CTY-KW**.....

Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (tên, kiểu loại, mã số hàng hóa)

..... **DUNG CỤ CAO LƯỠI**.....

Điều 2: Các phòng ban có liên quan của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Phòng ban có liên quan;
- Lưu.

Đại diện doanh nghiệp

Giám đốc



Gosuke Ko