

CÔNG TY TNHH KI-WORKS (VIỆT NAM)

Số 40 Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam -

TP. Thuận An, T. Bình Dương, Việt Nam

Singapore,

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 04:2020/CTY-KW

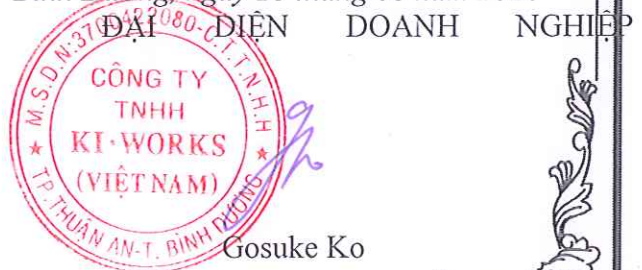
BÀN CHẢI KẼ RĂNG
ASAHI

Ban hành: lần 1

Soát xét:

Ký hiệu tiêu chuẩn thay thế:

Bình Dương, ngày 28 tháng 08 năm 2020



Gosuke Ko

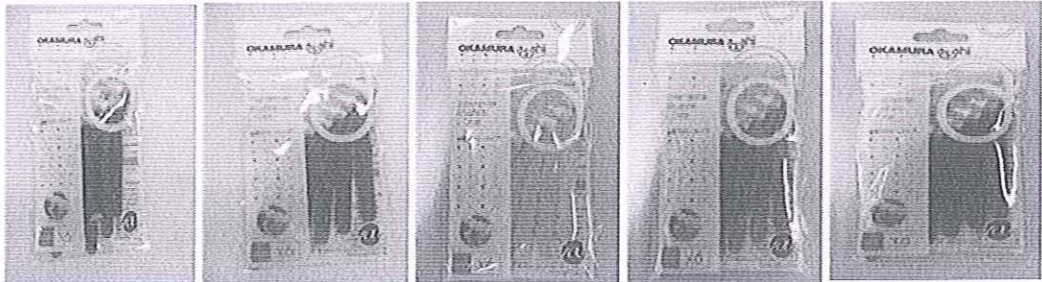
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 04:2020/CTY-KW

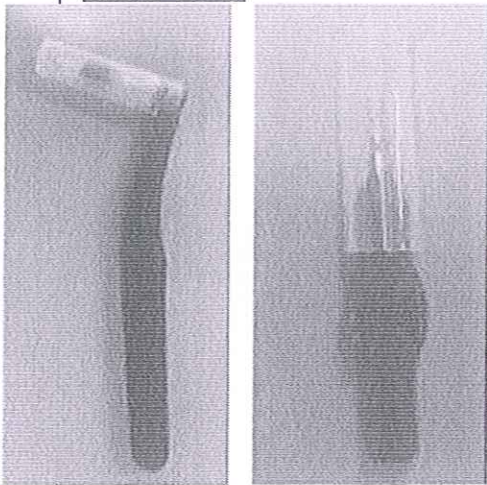
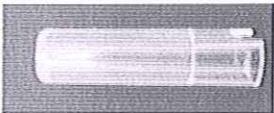
BÀN CHẢI KẼ RĂNG ASAHI

1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm: Bàn chải kẽ răng Asahi hình L (SSS-L), Bàn chải kẽ răng Asahi hình I (SSS-L) sử dụng để làm sạch kẽ răng và lấy đi thức ăn dư thừa bám trên răng, do Công ty THHH Ki-Works Việt Nam, địa chỉ: Số 40 Đại lộ Độc lập, KCN Việt Nam-Singapore, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương sản xuất, và do Công ty TNHH SX và TM T&H Việt Nam phân phối.

2. Quy cách sản phẩm:

Tên sản phẩm	Mô tả	Quy cách
Model số: 1.AS-EUID-8P SSS 2. AS-EUID-8P SS 3. AS-EUID-8P S 4. AS-EUID-8P M 5. AS-EUID-8P L 6.AS-LDXD-6P SSS 7. AS-LDXD-6P SS 8. AS-LDXD-6P S 9. AS-LDXD-6P M 10.AS-LDXD-6P L	 	

<u>1. Tay cầm:</u> 	- <u>Màu sắc:</u> đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương. - <u>Kích thước:</u> Hình chữ I: Chiều dài: $60 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ Hình chữ L: Chiều dài $70 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ <i>Ghi chú:</i> Các kích thước này có thể thay đổi tùy thuộc vào công năng sử dụng của sản phẩm và theo yêu cầu của thị trường. Kiểm tra kích thước bằng các dụng cụ đo chuyên dụng có cấp chính xác phù hợp. - <u>Chất liệu:</u> Polypropylenen - Polyethylene (PP), Thermoplastic Elastomer (TPE). - <u>Xuất xứ:</u> Đài Loan
<u>2. Đầu lông bàn chải:</u> 	- <u>Chất liệu:</u> Nylon - <u>Kích thước:</u> Chiều dài phần lông xương cá: $11 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$. <i>Ghi chú:</i> Các kích thước này có thể thay đổi tùy thuộc vào công năng sử dụng của sản phẩm và theo yêu cầu của thị trường. Kiểm tra kích thước bằng các dụng cụ đo chuyên dụng có cấp chính xác phù hợp. - <u>Xuất xứ:</u> Hàn Quốc
<u>3. Nắp:</u> 	- <u>Màu sắc:</u> Trong - <u>Thành phần:</u> Nhựa PP chính phẩm. - <u>Công dụng:</u> Bảo vệ đầu lông bàn chải không bị bụi bẩn trong quá trình vận chuyển và sử dụng. - <u>Xuất xứ :</u> Đài Loan
<u>4. Túi bao bì:</u>	- <u>Thành phần:</u> Nhựa OPP chính phẩm

		- Công dụng: Nhằm đóng gói sản phẩm sạch, đẹp, để sản phẩm không bị bám bẩn từ bên ngoài. - Xuất xứ: Đài Loan
	<u>5. Hộp bao bì:</u>	- Thành phần: Giấy chính phẩm - Công dụng: Nhằm đóng gói sản phẩm sạch, đẹp, để sản phẩm không bị bám bẩn từ bên ngoài. - Xuất xứ: Việt Nam

- Sản phẩm có nhiều màu sắc, nguyên liệu khác nhau tùy theo nhu cầu của thị trường và yêu cầu của khách hàng.

3. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử:

3.1 Yêu cầu về ngoại quan:

Sản phẩm trước khi được đem ra ngoài thị trường, phải được kiểm tra bằng mắt thường về độ đồng nhất của sản phẩm, sản phẩm có hình dạng cân đối, hài hòa, thẩm mỹ không được có chỗ dày mỏng bất thường nhìn thấy được.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét bên trong lẫn bên ngoài.

3.2. Phương pháp thử:

3.2.1 Khả năng chịu nhiệt của sản phẩm:

Sản phẩm không được biến dạng, không được chảy, nhão.

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm: Đặt sản phẩm vào tủ nhiệt đã cài đặt sẵn nhiệt độ 100°C trong 24h liên tục. Sau đó, mẫu được lấy ra ngoài. Sau thử nghiệm này, sản phẩm không được biến dạng, không được chảy, nhão.

3.2.2 Khả năng chịu tải tĩnh của sản phẩm:

Sản phẩm phải chịu được tải và không được hư hỏng biến dạng.

Kiểm tra sự phù hợp bằng thử nghiệm: Đặt lên kệ một khối lượng là 0.2 kg lên phần đầu bàn chải kẽ răng trong 2h. Sau thử nghiệm này, sản phẩm không được biến dạng, hư hỏng.

3.2.3 Số lần bẻ cong không gãy:

Sau thử nghiệm sản phẩm không được gãy tay hay biến dạng.

Tiến hành thử nghiệm: Dùng tay bẻ sản phẩm qua lại 30 lần trong 15 phút. Sau thử nghiệm sản phẩm không được gãy hay biến dạng.

3.2.4 Yêu cầu về lực kéo đứt giữa phần tay cầm và đầu lông bàn chải:

Trong sử dụng bình thường, bàn chải đảm bảo có đủ độ bền kéo đứt giữa phần tay cầm và đầu lông bàn chải.

Kiểm tra sự phù hợp bằng các thử nghiệm sau: Thử nghiệm kéo đứt 3 mẫu trên với máy kháng kéo, cài đặt tốc độ kéo 100 mm/min. Sau thử nghiệm, giá trị trung bình về lực kéo đứt của 3 mẫu ≥ 15 N là đạt yêu cầu.

4. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản:

4.1 Bao gói:

Sản phẩm được đóng gói thành:

- Bàn chải kẽ răng Asahi hình I: 8 cây/bao
- Bàn chải kẽ răng Asahi hình L: 6 cây/bao

Số lượng bàn chải kẽ răng có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

4.2. Ghi nhãn sản phẩm:

Trên mỗi đơn vị bao gói có dán nhãn phù hợp Nghị 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 và các văn bản hiện hành khác, nội dung bao gồm:

BÀN CHẢI KẼ RĂNG ASAHI (Hình L)
Công dụng: Được thiết kế đặc biệt giúp dễ dàng lấy đi các mảng bám trong khe răng hàm nơi mà bàn chải đánh răng thông thường không len tới được, giúp làm sạch kẽ răng và mắc cài chỉnh nha nhằm phòng ngừa bệnh nha chu, hôi miệng. Được nha sĩ khuyên dùng.
Cách dùng: dùng các ngón tay giữ thân rồi sau đó cho đầu bàn chải vào các kẽ răng, cứ làm vậy cho đến khi hoàn tất các kẽ răng.
Thành phần: sợi nylon, thép không gỉ, nhựa PE (PP), (+TPE).
Bảo quản: Trong điều kiện bình thường, tránh để gần hóa chất
Thông tin cảnh báo: Tránh xa tầm tay trẻ em.
Thông số kỹ thuật: chiều dài: 6 cm $\pm$ 0,2 cm
Số lượng: 8 cái/bịch Khối lượng tịnh: 20 gam ($\pm$ 2 gam)
Nhà sản xuất: Cty TNHH Ki-Works Việt Nam - Số 40 Đại Lộ Bình Dương, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.
Nhà phân phối: Công ty TNHH SX&TM T&H Việt Nam - Số 12, ngõ 370, Thụy Khuê, Tây Hồ, Tp. Hà Nội.
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh - 745/131 Quang Trung, P.12, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (028) 6289 2025 Fax: (028) 6289 2023
Hạn sử dụng: 10 năm kể từ ngày sản xuất (NSX xem trên bao bì - ngày/tháng/năm)

BÀN CHẢI KẼ RĂNG ASAHI (Hình I)
Công dụng: Được thiết kế đặc biệt giúp dễ dàng lấy đi các mảng bám trong khe răng hàm nơi mà bàn chải đánh răng thông thường không len tới được, giúp làm sạch kẽ răng và mắc cài chỉnh nha nhằm phòng ngừa bệnh nha chu, hôi miệng. Được nha sĩ khuyên dùng.
Cách dùng: dùng các ngón tay giữ thân rồi sau đó cho đầu bàn chải vào các kẽ răng, cứ làm vậy cho đến khi hoàn tất các kẽ răng.
Thành phần: sợi nylon, thép không gỉ, nhựa PE (PP), (+TPE).
Bảo quản: Trong điều kiện bình thường, tránh để gần hóa chất
Thông tin cảnh báo: Tránh xa tầm tay trẻ em.
Thông số kỹ thuật: chiều dài: 7 cm $\pm$ 0,2 cm
Số lượng: 8 cái/bịch Khối lượng tịnh: 20 gam ($\pm$ 2 gam)
Nhà sản xuất: Cty TNHH Ki-Works Việt Nam - Số 40 Đại Lộ Bình Dương, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.
Nhà phân phối: Công ty TNHH SX&TM T&H Việt Nam - Số 12, ngõ 370, Thụy Khuê, Tây Hồ, Tp. Hà Nội.
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh - 745/131 Quang Trung, P.12, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (028) 6289 2025 Fax: (028) 6289 2023
Hạn sử dụng: 10 năm kể từ ngày sản xuất (NSX xem trên bao bì - ngày/tháng/năm)

5. Phương pháp sử dụng:

Dùng các ngón tay giữ thân rồi sau đó cho đầu bàn chải vào các kẽ răng, cứ làm như vậy cho đến khi hoàn tất những kẽ răng.

6. Vận chuyển: Vận chuyển trong điều kiện bình thường, tránh va đập mạnh.

7. Bảo quản: Bảo quản trong điều kiện bình thường, tránh để gần hóa chất.

**CÔNG TY TNHH KI-WORKS
VIỆT NAM**

Số: 04:2020/QĐ-KW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 28 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng:

CÔNG TY TNHH KI-WORKS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 07 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật;
- Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này:

Tiêu chuẩn **TCCS 04:2020/CTY-KW**

Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (tên, kiểu loại, mã số hàng hóa)

..... **BÀN CHẢI KẼ RĂNG ASAHI**

Điều 2: Các phòng ban có liên quan của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Phòng ban có liên quan;
- Lưu.

Đại diện doanh nghiệp

Giám đốc



Gosuke Ko